

SKU# 200-037

Sales Inquiries: John Sperrazzo
(858) 361-4495 john@zshieldsusa.com

Reusable Protective Face Shield 2.0

Personal protective equipment (PPE) designed to help protect your face, mouth and eyes from spray and splatter.

Product Features:

- Fast assembly and easy cleaning
- Elastic band offers secure fit
- Scratch resistant
- Anti-fog



MADE IN THE USA

Each set includes one each of these component parts:

Headset



Dimensions

X - 8.16" Y - 7.78" Z - 0.47"

Materials

Profax 6323 (PP Homopolymer)
Profax 6523 (PP Homopolymer)
Profax PD702 (PP Homopolymer)

Usage Multi-Use
Sterilization NON-STERILE

Sterilization/Cleaning Instructions

The autoclave must reach and maintain a temperature of 121° C for at least 30 minutes by using saturated steam under at least 15 psi of pressure (note: applies to headsets only).

Flex Fit

The headset is designed for an adjustable fit. If you gently bend the arms outward, you'll be able to get a more comfortable fit for larger head sizes.

Visor



Dimensions

8.75" L

Materials

Polycarbonate
PETG
APET

Usage Multi-Use
Sterilization NON-STERILE

Sterilization/Cleaning Instructions

- Wipe down with soap and warm water
- UV Sterilization

Please Recycle




PET
VISOR



PP
HEADSET

Application Band

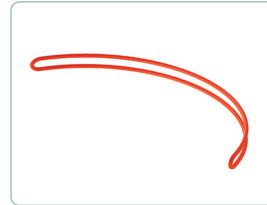

Dimensions

Standard Elastic Band

Materials

Organic Rubber


Usage Single-Use
Sterilization NON-STERILE

Safety Tips


- Each headset should be cleaned between uses
- Parts should not be shared between persons without submitting for sterilization
- Always practice good hygiene

Assembly Instructions


How to Assemble

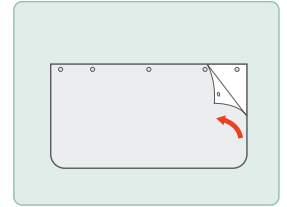

1. Remove items from box and place on a clean surface. Peel off protective cover from visor.

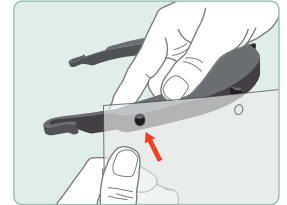


2. Ensure headset is positioned correctly with "top side" facing up. Align holes in visor with pins in headset (left to right). Attach visor to headset by snap-fitting each prong to hole.

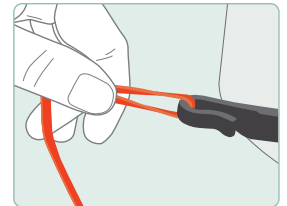

3. Loop application band through hooks in headset.



4. Apply protective face shield to head and secure in place with application band.

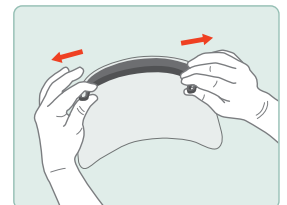

5. For larger head sizes, gently bend the arms of the headset outward for a more comfortable fit.



Personal Protective Equipment EUA

On the basis of this determination, the Secretary of Health & Human Services declared that circumstances exist justifying the authorization of emergency use of personal respiratory protective devices during the COVID-19 outbreak pursuant to section 564 of the FD&C Act, subject to the terms of any authorization issued under that section.

If you have any questions, please email: CDRH-NonDiagnosticEUA-Templates@fda.hhs.gov

Protector Facial Reusable 2.0

Equipo de protección personal diseñado para proteger su cara, boca y ojos de salpicaduras.

Características del producto:

- Montaje rápido y limpieza fácil
- Banda elástica que ofrece un ajuste seguro
- Resistente a rayones
- Antiniebla



HECHO EN ESTADOS UNIDOS

Cada juego incluye las siguientes partes:

Soporte Frontal



Dimensiones

X - 8.16" Y - 7.78" Z - 0.47"

Materiales

Profax 6323 (PP Homopolímero)
Profax 6523 (PP Homopolímero)
Profax PD702 (PP Homopolímero)

Uso Multiuso
Esterilización NO ESTÉRIL

Esterilización/Instrucciones de Limpieza

El autoclave debe alcanzar y mantener una temperatura de 121° C por al menos 30 minutos utilizando vapor saturado a una presión de al menos 15 psi (nota: aplicable sólo para el soporte frontal).

Calce Flexible

El soporte frontal está diseñado para ser ajustado. Si delicadamente doblas las patillas hacia afuera, obtendrás un calce más cómodo para cabezas de mayor tamaño.

Visor



Dimensiones

8.75" L

Materiales

Policarbonato
PETG
APET

Uso Multiuso

Esterilización/Instrucciones de Limpieza

- Enjuagar con jabón y agua tibia
- Esterilización UV

Por Favor Recicle



PET




PP

VISOR

SOPORTE FRONTAL

Banda de Aplicación

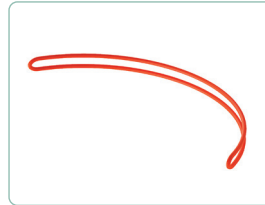

Dimensiones

Banda elástica estándar

Materiales

Goma orgánica

Uso Un solo uso

Esterilización/Instrucciones de Limpieza


NO ESTÉRIL

Consejos de Seguridad


- El Soporte Frontal debe ser lavado entre usos
- Las partes no deben compartirse entre personas sin someterse a esterilización
- Practique siempre una buena higiene

Instrucciones de Ensamblado


Cómo Ensamblar

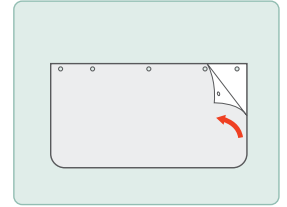

1. Remueva las partes de la caja y colóquelas en una superficie limpia. Despegue la cubierta protectora del visor.

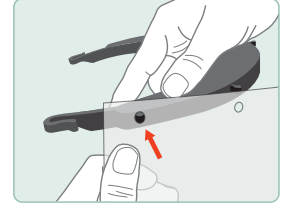


2. Asegúrese que el soporte frontal esté posicionado correctamente con el "lado superior" hacia arriba. Alinee los agujeros del visor con los pasadores en el soporte frontal (de izquierda a derecha). Adjunte el visor al soporte frontal ajustando cada punta al orificio.

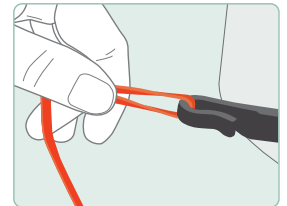

3. Coloque la banda de aplicación a través de los ganchos en el soporte frontal.



4. Colóquese el protector facial y asegúrelo en su lugar con la banda de aplicación.

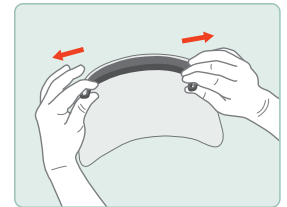

5. Para cabezas de mayor tamaño, doble delicadamente las patillas del soporte frontal hacia afuera para un calce más cómodo.

